

PRELEVAREA DE PROBE/ MOSTRE


Ghid pas-cu-pas

Aveți nevoie de ajutor?

Dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme cu acest kit de testare, vă rugăm să anunțați un membru al personalului.

Prelevarea de probe poate fi neplăcută. Nu introduceți mostra mai adânc dacă resimțiți rezistență sau durere puternice.

Dacă pe mostră apare sânge sau vomă, anunțați de urgență un membru al personalului.

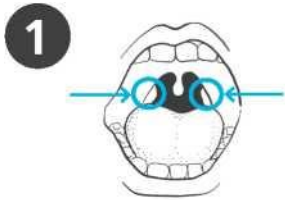

Scoateți masca.

Uitați-vă în interiorul gurii și găsiți amigdalele, acestea fiind situate în partea din spate a gâtului.

Puteți folosi o oglindă în acest sens.


Amigdalele sau locul unde ar fi trebuit să fie localizate (în cazul îndepărtării lor) se află în zona unde veți introduce mostra.



Suflați-vă ușor nasul într-un șervețel.


Aruncați șervețelul folosit în coșul de deșeuri clinice pus la dispoziție.

În acest fel, veți elimina excesul de mucus.

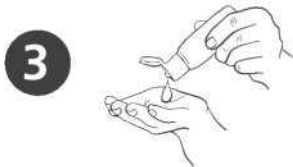

Folosiți dezinfectantul pentru mâini pentru a vă curăța mâinile.

În acest fel, veți evita contaminarea kitului de testare.

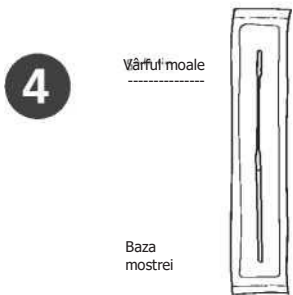

Vârful moale


Verificați dacă vedeți o mostră în ambalaj sigilat.

Identificați vârful din material moale al mostrei.

Baza mostrei

Deschideți ambalajul și scoateți ușor mostra.

Aceasta va fi utilizată atât pentru gât, cât și pentru nas.

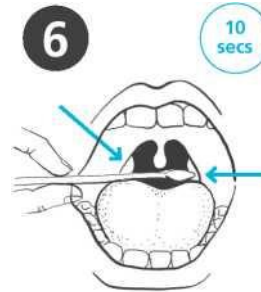

10
secs

Ținând mostra în mână, deschideți gura larg și frecăți vârful din material al mostrei peste ambele amigdale (sau locul unde ar fi trebuit să fie acestea) în partea din spate a gâtului, atingând corespunzător de cel puțin 3 ori (folosiți o oglindă în acest sens).

Îndepărtați cu grijă mostra din partea din spate a gâtului.



10-15
secs

Introduceți același capăt al aceleiași mostre într-o nară, până când simțiți o ușoară rezistență (aproximativ 2,5 cm în partea de sus a nasului).

Rulați **mostra de 5 ori** de-a lungul nării.

După colectarea probei, țineți mostra în poziție verticală în mână, nu o puneți jos și anunțați unul din asistenții Centrului de testare.

Aveți grijă să nu atingeți nicio suprafață cu mostra respectivă.

Puneți-vă înapoi masca.

Respectați instrucțiunile date de un membru al personalului privind pașii următori.

Folosiți dezinfectantul pentru mâini după ce predați proba.

Nu atingeți limba, dinții, obrații, gingiile sau orice alte suprafețe cu vârful din material al probei.

Proba își pierde valabilitatea dacă atingeți aceste părți și va trebui să repetați întreg procedeu. Dacă se întâmplă acest lucru, cereți ajutorul unui membru al personalului.

NHS

Scoția
Guvernul Scoției